


CaseShower SUIHKUTYYNY

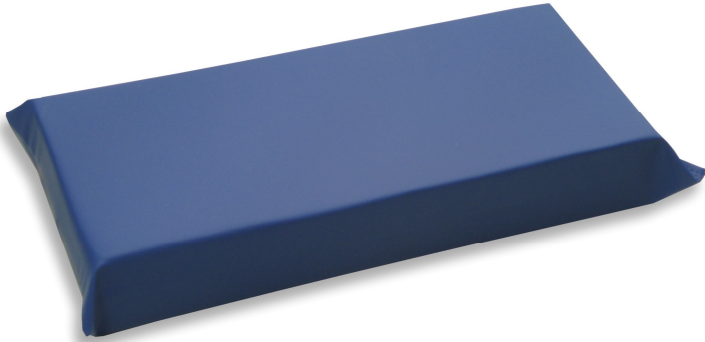

VAKIOKOKO

20 x 45 x 7 cm

- Antidecubitus päänalustyyny kosteisiin tiloihin
- Sisus lämpöreaktiivista, viskoelastista geelivaahtoa
- Kiinteä, likaa hylkivä, kuuma-saumattu hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- umpeen ommellut saumat

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Sisus on viskoelastista PU-geelivaahtoa.

TOIMIVUUS

- Käytetään pään alla esim. suihkupritsillä ehkäisemään painehaavojen syntymistä.
- Lämpöreaktiivinen geelivahto muotoutuu painon ja lämmön vaikutuksesta tasaten pintapaineita ja suoden käyttäjälle rentouttavan asennon.
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 6 kuukautta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.

