


CaseSlow ANTIDECUBITUSTYyny

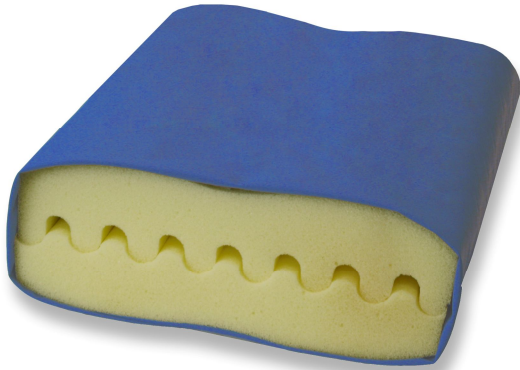

VAKIOKOKO

50 x 42 x 12 cm

- Sisus lämpöreaktiivista, viskoelastista geelivaahtoa
- Soveltuu painehaavojen ehkäisyyn korvien ja pään alueella
- Ympäristöystävälliset materiaalit
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju toisella pitkällä sivulla



MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Sisus on PU-vahtomuovia.

TOIMIVUUS

- Tyynyn 2-kerroksinen geelivaahtosisus reagoi lämpöön ja paineeseen ehkäisten painehaavojen syntymistä pään alueella.
- Muotonsa takia tyynyä voidaan käännellä ilman että ergonomisuus kärsii.
- Joustavassa ja hengittävässä päällisessä on antidecubitusominaisuus.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuoja
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Pehmusteelle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.

