


# EkoUltra GEELIVAAHTO TÄYSPATJA

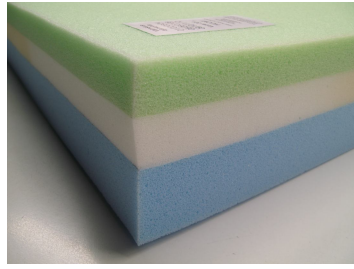


VAKIOKOOT (erikoiskoot mittatilaustyönä)		
Leveys cm	Pituus cm	Korkeus cm
75/78/80/ 85/88/90	200/205/208/210	13

- Keskiriskin antidecubituspatja
- Ympäristöystävällinen, soijapohjainen
- Edistää potilaan omatoimisuutta
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Painosuositus 0-150 kg

## PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

### Medicase

- hygieniapäällinen
- ommellut saumat
  - tippasuojallinen vetoketju kahdella sivulla

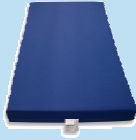

### MedicaseKS

- kuumasaumattu hygieniapäällinen
- nestetiiviit saumat
  - nestetiivis vetoketju kahdella sivulla




### Mediresc

- pelastuspäällinen
- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
  - ks. erillinen **Mediresc** esite



### MedirescSafe

- pelastuspäällinen
- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
  - potilasturvallinen rakenne on suunniteltu erityisesti psykiatrisille osastoille
  - ks. erillinen **MedirescSafe** esite

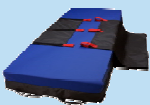

## MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomio ominaisuudet.
- Vahto-osat on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta, soijaöljystä.
- Vaahdon korkea tiheyspaino (43/50 kg/m<sup>3</sup>) takaa pitkän käyttöiän.

## TOIMIVUUS

- Painehaavojen syntymistä ehkäisevä viskoelastinen antidecubituspatja. Tässä patjassa yhdistyvät antidecubitus-sijauspatja ja hygieniapatja yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.
- Vaahtorakenteiden painereduktio-ominaisuudet on tutkittu tietokonepohjaisella FSA-mittauslaitteella.
- Kehon lämmön ja painon yhteisvaikutuksesta hitaasti muotoutuva, viskoelastinen polyuretaanigeeli tasaa pintapaineet ehkäisten puutumista ja painehaavojen muodostumista.
- Patja auttaa lihaksia rentoutumaan ja vähentää asennon vaihtamisen tarvetta. Huom! Asentohoito on aina välttämätöntä patjoista huolimatta!

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

## TAKUU

- 5 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

## HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuattu.
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton.
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi.

## PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesispesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

