


EkoWave GEELIVAAHTO TÄYSPATJA

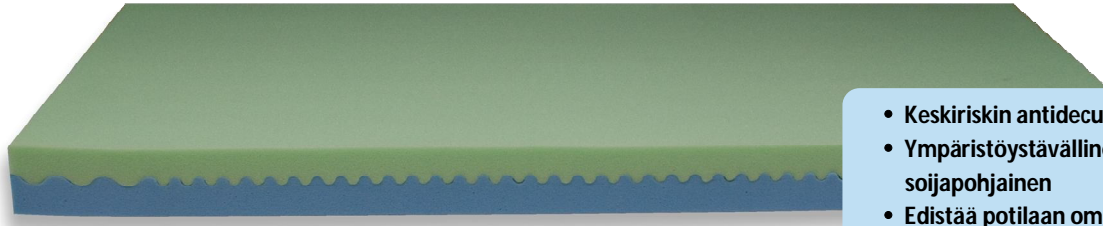


- Keskiriskin antidecubituspatja
- Ympäristöystävällinen, soijapohjainen
- Edistää potilaan omatoimisuutta
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Painosuositus 0-150 kg

VAKIOKOOT (erikoiskoot mittatilaustyönä)		
Leveys cm 75/78/80/ 85/88/90	Pituus cm 200/205/208/210	Korkeus cm 13

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase

- hygieniapäällinen
- ommellut saumat
 - tippasuojallinen vetoketju kahdella sivulla

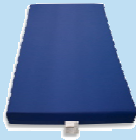

MedicaseKS

- kuumasaumattu hygieniapäällinen
- nestetiiviit saumat
 - nestetiivis vetoketju kahdella sivulla




Mediresc

- pelastuspäällinen
- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
 - ks. erillinen **Mediresc** esite



MedirescSafe

- pelastuspäällinen
- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
 - potilasturvallinen rakenne on suunniteltu erityisesti psykiatrisille osastoille
 - ks. erillinen **MedirescSafe** esite

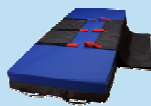

MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiaominaisuudet
- Vahto-osat on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta, soijaöljystä.
- Vaahdon korkea tiheyspaino (43/50 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän.

TOIMIVUUS

- Vaahtorakenteiden painereduktio-ominaisuudet on tutkittu tietokonepohjaisella FSA-mittauslaitteella.
- Patjan aaltomainen yhdistelmä rakenne sekä hyvin painetta tasaava viskoelastinen pintakerros takaavat patjan toimivuuden.
- Patja ehkäisee tehokkaasti painehaavojen syntymistä sekä edistää potilaan omatoimisuutta ja helpottaa hoitajien työtä.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 5 vuotta sisuksen, 2 vuotta päällisen materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuuttu.
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton.
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi.

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuoksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.

