

MediumXL GEELIVAAHTO TÄYSPATJA



VAKIOKOOT (erikoiskoot mittatilaustyönä)		
Leveys cm 75/78/80/ 85/88/90	Pituus cm 200/205/208/210	Korkeus cm 17


- Keskiriskin antidecubituspatja painaville potilaille
- Ympäristöystävällinen, soijapohjainen
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Painosuositus 0-200 kg

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase

hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- tippasuojallinen vetoketju kahdella sivulla

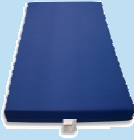

MedicaseKS

kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat
- nestetiivis vetoketju kahdella sivulla



Mediresc

pelastuspäällinen

- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
- ks. erillinen **Mediresc** esite



MedirescSafe

pelastuspäällinen

- kiinteä pelastuslakana-ominaisuus
- potilasturvallinen rakenne on suunniteltu erityisesti psykiatrisille osastoille
- ks. erillinen **MedirescSafe** esite



MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiominaisuudet.
- Vaahto-osat on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta, soijaöljystä.
- Vaahton korkea tiheyspaine (43/50 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän.

TOIMIVUUS

- Painehaavojen syntymistä ehkäisevä viskoelastinen antidecubituspatja. Tässä patjassa yhdistyvät antidecubitus-sijauspatja ja hygieniapatja yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.
- Vaahtorakenteiden painereduktio-ominaisuudet on tutkittu tietokonepohjaisella FSA-mittauslaitteella.
- Kehon lämmön ja painon yhteisvaikutuksesta hitaasti muotoutuva, viskoelastinen polyuretaanigeeli tasaa pintapaineet ehkäisten puutumista ja painehaavojen muodostumista.
- Patja auttaa lihaksia rentoutumaan ja vähentää asennon vaihtamisen tarvetta. Huom! Asentohoito on aina välttämätöntä patjoista huolimatta!

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 5 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojuuttu.
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton.
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi.

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

