


# PedicStabil ASENTOHOITOTUKI

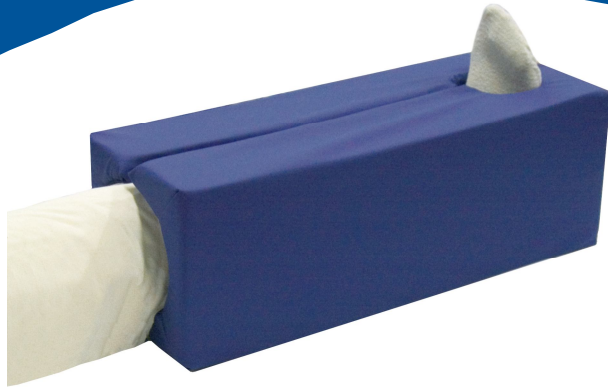

- Alaraajaa stabilisoiva asento-  
hoitotuki
- Kantapään alla oleva reikä poistaa  
paineen kokonaan kantapäästä
- Likaa hylkivä, läpäisemätön  
hygieniapäällinen

## VAKIOKOOT

20 x 53 x 18 cm  
25 x 70 x 20 cm

## PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju kolmella sivulla



## Hyödyllisyysmallisuoja nro 6643

### MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Sisus PU-kimmovaahtoa

### TOIMIVUUS

- Raajaa stabilisoiva asentotuki, joka estää virheasentojen syntymistä
- Poistaa paineen kokonaan kantapäästä
- Hengittävässä hygieniapäällisessä on antidecubitus-ominaisuus

### PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

### TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

### HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuoja
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

### PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %),  
satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Pehmusteelle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

