

# Eko™ UltraP

## KORKEALUOKKAINEN PAARIPATJA



*Eko™ UltraP on matalan ja keskinkertaisen riskin paine-  
haavapatja. Käytön painoraja max. 150 kg.*

*Eko™ UltraP täyttää korkealuokkaisen vaahtomuovipat-  
jan kriteerit vaahdon toiminnallisen ominaisuuden,  
tyypin, tiheyden, kimmoisuuden, CLD-kovuuden, pro-  
gressiivisen kovuuden, vetolujuuden, murtovenymän,  
kerrosten paksuuden ja tuotantotoleranssin osalta.<sup>1</sup>*

*Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus  
tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on  
arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.*



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### YLEISKUVAUS

Eko™ UltraP on painehaavojen syntymistä ehkäisevä patja. Patja pyrkii kudospaineen tasaamiseen ensisijaisesti uppouman ja myötäilevyyden hallinnalla.\* Potilaan paino jakautuu patjalla tasaisesti tukien potilaan omatoimisuutta.

Paaripatjan 3-kerrosrakenne sekä hyvin paineita tasaava pintakerros takaavat patjan toimivuuden. Kehon lämmön ja painon yhteisvaikutuksesta hitaasti muotoutuva, viskoelastinen EKO PU-geeli-vahto tasaa kudospaineita ehkäisten puutumista ja painehaavojen muodostumista.\*

Paareihin tarkoitetuissa patjoissa on viistoksi muo-  
toillut kulmat.

**\*KUDOSPÄINEEN TASAAMINEN =  
antidecubitusominaisuus\***

### KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Painehaavojen ennaltaehkäisy makuualustana makuutasoilla matalan ja keskinkertaisen paine-  
haavariskin potilailla, joille terveydenhuollon am-  
mattihenkilö on määrittänyt käytön tarpeelliseksi  
painehaavariskin tai muun käyttötärpeen vuoksi  
sekä arvioinut tuotteen sopivan kyseiseen hoitoti-  
lanteeseen.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammatti-  
yksiköt sekä kotikäyttö.

### KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon am-  
mattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeis-  
tama maallikko.

Kohdepotilaita ovat matalan ja keskinkertai-  
sen painehaavariskin potilaat edellä mainituissa  
ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammat-  
tihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle

sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaal-  
le ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

### INDIKAATIOT

Painehaavariskiluokat teknisen rakenteen perus-  
teella voidaan arvioida olevan matala ja keskin-  
kertainen riski, kun otetaan huomioon kaikki muut  
tekijät.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava  
makuualustan mitat erikseen.

Resuskitaation yhteydessä suositellaan potilaan ja  
patjan väliin asetettavaksi kova levy niin pian kuin  
se on mahdollista elvytyksen käynnistämistä ja re-  
suskitaatiota häiritsemättä.

### VASTA-AIHEET

Tuotetta ei saa käyttää potilailla, joilla on korkea  
tai erittäin korkea painehaavan riski kliinisen ar-  
vioinnin perusteella. Tuotetta ei saa käyttää po-  
tilailla, joille on jo kehittymässä tai kehittynyt  
painehaava eli painehaavojen vaikeusasteen luo-  
kituksessa kategoriat/asteet I-IV (NPUAP & EPUAP  
2009). Käyttö kontraindisoitu kaikissa painehaa-  
valuokissa: kategorio/aste I; Vaalenematon ery-  
teema, kategorio/aste II; Ihon pinnallinen vaurio,  
kategorio/aste III; Koko ihon vaurio, kategorio/  
aste IV; Vaurio koko ihon ja ihonalaisen kudoksen  
paksuudelta.

### TUOTETURVALLISUUS


Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR)  
mukainen luokan I lääkinällinen laite (Sääntö 1 -  
Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit  
ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja  
analysoitu biotyhteensopivaksi EN ISO 10993 -mu-  
kaisesti. Vaahtomateriaalit ovat CertiPUR-sertifioi-  
tuja. Tuotteen paloluokitus on SL 1.<sup>2</sup>



### VALMISTAJA / MYYNTI

**MediMattress Oy**  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi

## Eko™ UltraP KORKEALUOKKAINEN PAARIPATJA

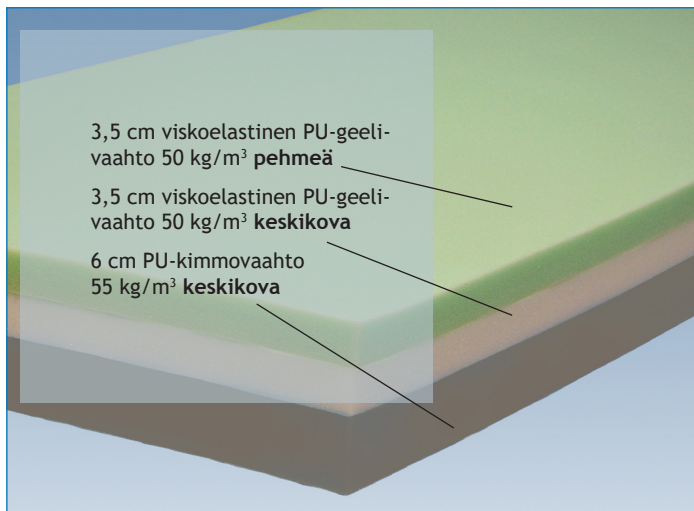

### VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Kolme kiinteästi yhteen liimattua kerrosta. Vaahdon korkea tiheyspaino (50/55 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän. Patjan pinnassa on 7 cm viskoelastista PU-geelivaahtoa ja pohjassa 6 cm PU-kimmovaahtoa.

### HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritetiivistä<sup>4</sup> PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys<sup>5</sup>. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus<sup>6</sup>. Ommelluilla saumoilla varustetussa vakiopäällisessä on yksi yhtenäinen vetoketju yhdellä pitkällä ja yhdellä lyhyellä sivulla.

Eko™UltraP on saatavilla myös esim. kiinteällä **Mediresc™**-pelastuspäällisellä (ks. erillinen esite).



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### PÄÄLLISVARIANTIT

**Medicase® AS** (antistaattinen vakiopäällinen)  
**Mediresc™ AS** (pelastuspäällinen antistaattisella pintakankaalla)

### MAKUUALUSTAN LISÄVARUSTEET

**Matra** (lisäpäällinen)  
**MediEva** (pelastuslakana)  
**ProEva** (pelastuslakana)

### KOOT JA PAINO

Valittavissa parin koon mukaan:  
60-70 x 180-200 x 13 cm

Paino päällisineen n. 8 kg.

### TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Patjan arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- sisukset: viisi (5) vuotta
- päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajätteisiin.

### TAKUU

Vaahtosisuksilla on viiden (5) ja päällisillä kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

### HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen **pintapyyhintä** pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Päällinen voidaan irrottaa ja **pestä** pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai **max. 95 °C:ssa**.

**Huom! Vaahtosisukselle ei vesipesua!**



### LÄHTEET

<sup>1</sup>Soppi E, Lehtiö J, Saarinen H. An overview of polyurethane foams in higher specification foam mattresses. Ostomy Wound Management 61(2): 38-46, 2015.

<sup>2</sup>Testattu EN 597-1&2 sekä IMO 2010 FTPC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.

<sup>3</sup>Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

<sup>4</sup>Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

<sup>5</sup>Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

<sup>6</sup>Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.



### VALMISTAJA / MYYNTI

**MediMattress Oy**  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi